

## Uppgradera till ny version

Läs igenom hela installationsanvisningen innan du påbörjar uppgraderingen. Om du är osäker på något i installationsanvisningen, kontakta din lokala tekniker. Installationen ska ske på alla datorer. Databasen uppgraderas bara **en** gång från server/huvuddator.

### Viktigt inför uppgradering till ny version

- **Ta backup av Opusdatabasen innan uppgradering**
- Finns det flera Opusdatabaser på samma server måste uppgradering ske samordnat för samtliga databaser
- Inloggad Windowsanvändare ska vara den användare som heter Administratör. Att använda en annan användare är inte tillräckligt även om denna är medlem i gruppen Administratörer. Detta kan innebära att användaren administratör måste aktiveras i Windows
- Installationsfilen ska sparas ner lokalt på datorn först. Kör sedan installationsfilen därifrån
- Avaktivera antiviruskyddet tillfälligt. Kom ihåg att aktivera det igen
- Microsoft stödjer inte längre Windows XP. Detta medför att vi inte kan garantera att Opus Dental fungerar tillsammans med detta operativsystem

### Ladda ner installationsfil


- Klicka på länken på Insikt <https://insikt.ptj.se/Support/Opus-Dental/Programuppdateringar/> eller på sidan för tekniker <http://www.praktikertjanst.se/Opus/>
- Webbbläsare öppnas. Klicka på **Spara**, filen ska sparas lokalt på datorn
- Gå till mappen där installationen sparades

## Installera Opus Dental


1. Starta installationen genom att dubbelklicka på installationsfil

**OpusDental71sweden.msi**  OpusDental71sweden.msi



2. Klicka Next

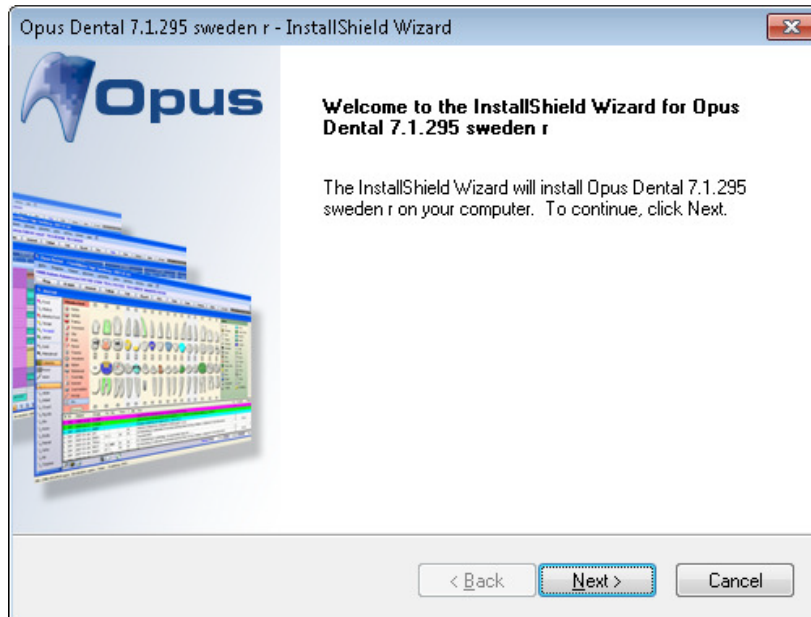


3. Klicka Next

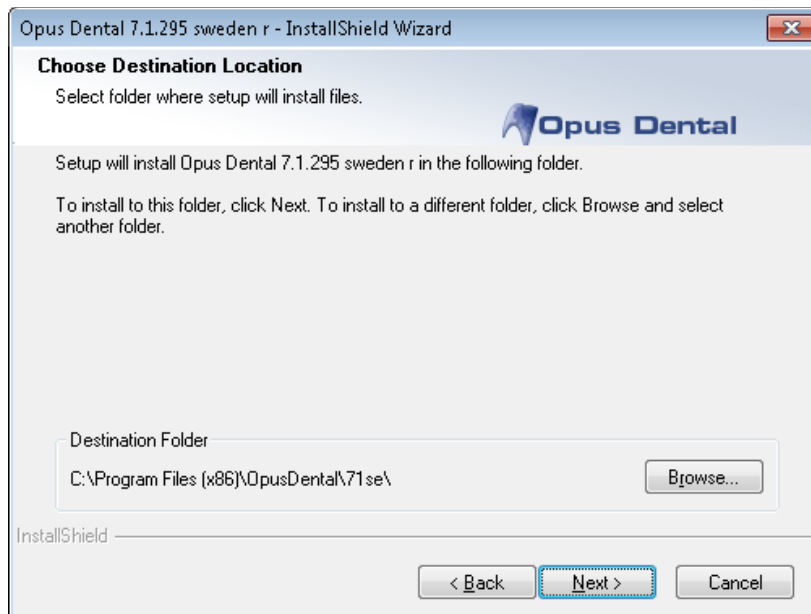

#### 4. Klicka Install

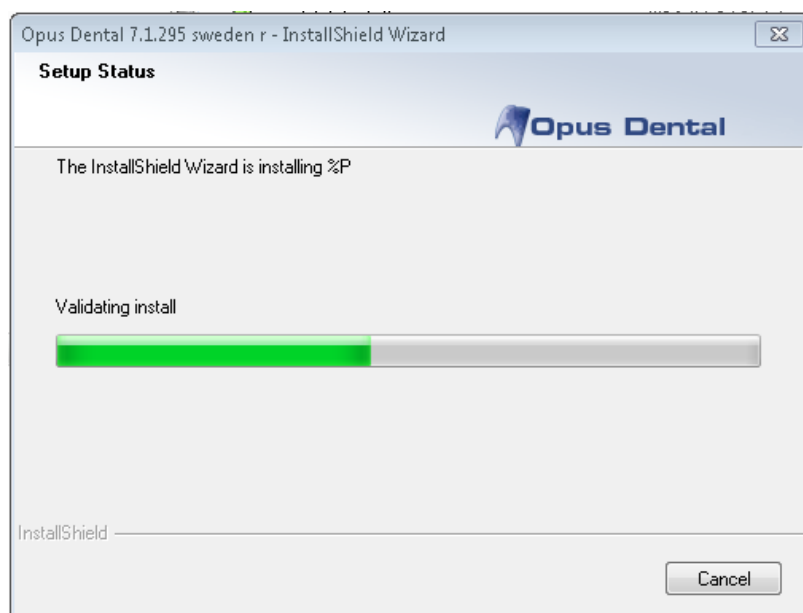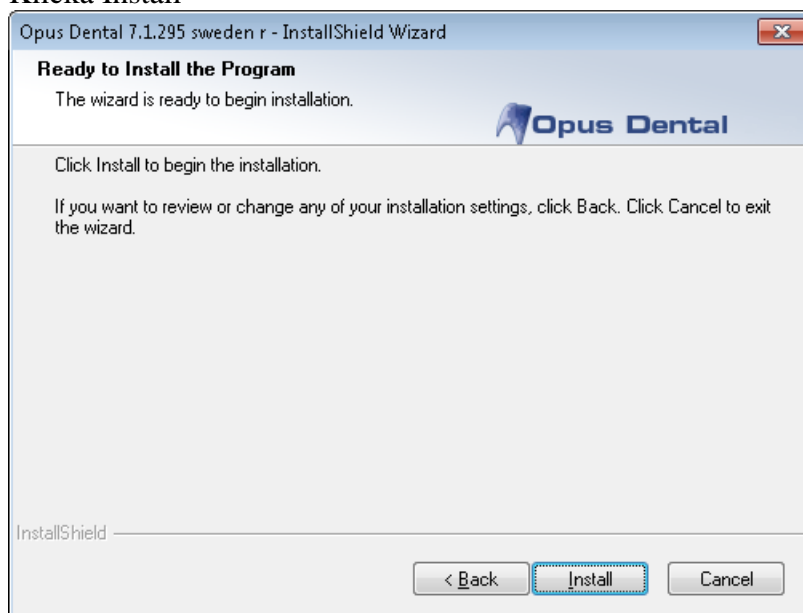

## 5. Klicka Finish

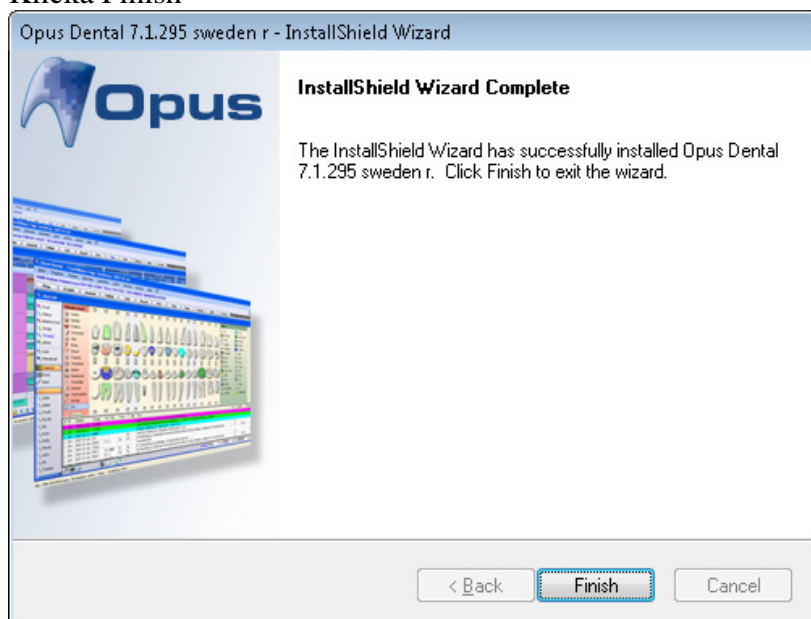

## Uppgradera Opusdatabas


1. Starta Opus första gången efter uppgradering från server/huvuddator




2. Logga in i Opus med användarnamn och lösen



3. Svara Ja på frågan om databasen ska uppgraderas

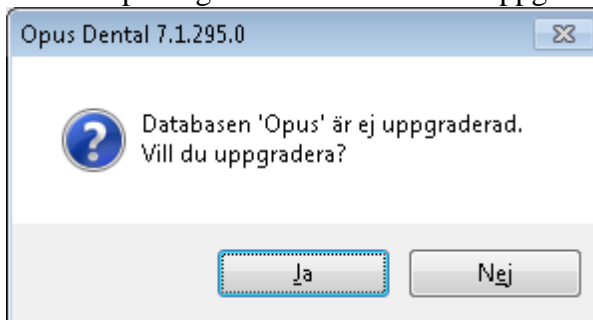

4. Ange användarnamn sa och lösenordet för användare sa, klicka sedan OK

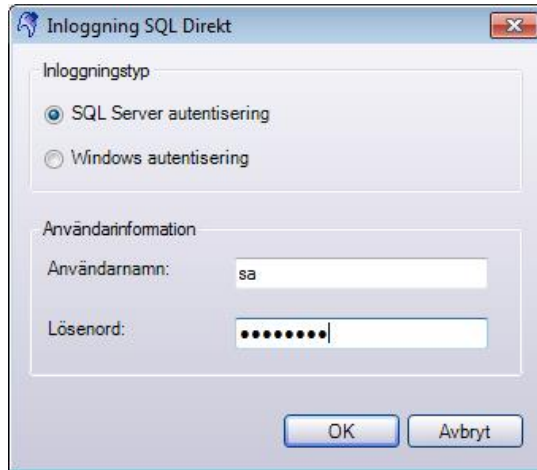

5. Databasen uppgraderas



6. När uppgraderingen av databasen är klar öppnas Opus som vanligt